


Dinámica rotacional

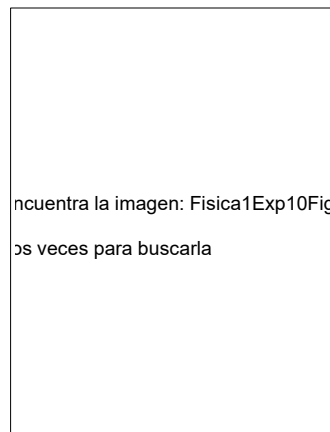


Encuentra la imagen: Fisica1Exp10Fig
5 veces para buscarla

El propósito de este experimento es medir el momento de inercia de un objeto que rota alrededor de un eje fijo y emplearlo para medir masas desconocidas.

Encuentra la imagen: k
5 veces para buscarla

Materiales

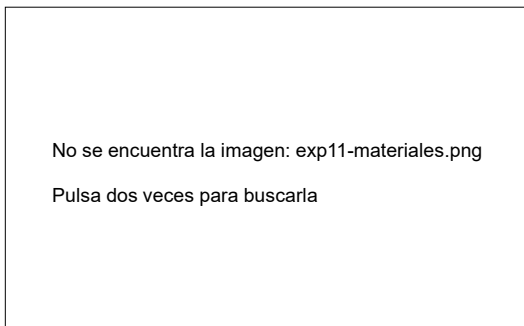

- 1) Móvil giratorio con sus masas ajustables y soporte.
- 2) Sujetadores.
- 3) Varilla de 1 m.
- 4) Fotocelda Vernier y su varilla de soporte.
- 5) Polea Vernier.
- 6) Interfaz LabQuest Stream


ra la imagen:
s para busca

Toma de Datos 1

Primera medida:

El móvil giratorio no lleva puesto las masas cilíndricas en sus brazos laterales.

- 1) Ajuste el número de eventos a medir.
- 2) El sensor proporcionará el tiempo (en segundos) y la distancia recorrida (en centímetros)
- 3) Mida la masa suspendida en gramos y el radio del móvil giratorio e ingréselos en los parámetros [Masa_suspendida](#) y [Radio_móvil_giratorio](#) respectivamente.

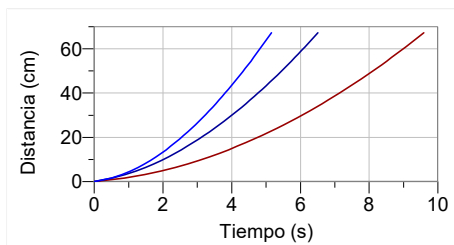

Recuerde:
Antes de iniciar la toma de datos, asegúrese de calibrar la fotocelda.
Consulte la guía para ver cómo.

Distancia
3,200 cm

Tiempo
1,234677 s

Masa_suspendida 110,0 gr

Radio_móvil_giratorio 1,230 cm

tra la imagen: u
:es para buscarl

Toma de Datos 2 y 3


Segunda y tercera medidas:

El móvil giratorio lleva puesto las masas cilíndricas en sus brazos laterales.

1) Mida la masa de una de las masas cilíndricas y regístrela en el parámetro [Masa_cilíndrica](#).

2) La segunda medida se hace con estas masas ubicadas en los extremos de las barras del móvil giratorio. Mida la distancia de uno de los discos al eje de rotación y regístrela en el parámetro [Distancia_1](#).

3) La tercera medición lleva los discos en un punto intermedio (no puede ser la mitad) en las barras laterales del móvil rotatorio. Mida la distancia del disco al eje de rotación y regístrela en el parámetro [Distancia_2](#).

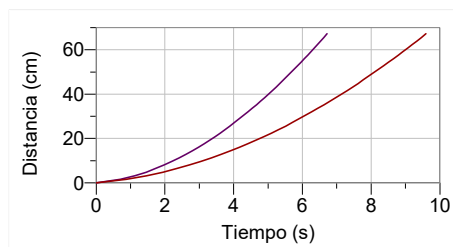

a la imagen
s para buscar

Masa_cilíndrica 120,0 gr
Distancia_1 29,0 cm
Distancia_2 17,7 cm

Tiempo
1,234677 s

Distancia
3,200 cm

Análisis cualitativo

la imagen
para buscarla

¿Qué implica que un cuerpo tenga mayor momento de inercia? ¿Cómo puede divisar este efecto en los resultados obtenidos?

¿Qué puede decir sobre el tipo de movimiento angular del móvil? ¿Es uniforme? ¿Es acelerado? No olvide el porqué.

¿Hasta qué punto es razonable suponer que los discos son masas puntuales? ¿Cómo cambiaría el cálculo de la masa de cada disco si se hiciese caso omiso a dicha suposición?

¿Cómo cambiarían las aceleraciones calculadas si se tuviese en cuenta el momento de inercia de la polea? ¿Aumentarían? ¿Disminuirían?

¿Cómo incidiría el radio del rodillo en donde la cuerda se enrolla sobre la aceleración angular si no se cambia la masa suspendida en ella?

Análisis cualitativo

4) ¿Cómo cambiarían las aceleraciones calculadas si se tuviese en cuenta el momento de inercia de la polea? ¿Aumentarían? ¿Disminuirían?


5) ¿Cómo incidiría el radio del rodillo en donde la cuerda se enrolla sobre la aceleración angular si no se cambia la masa suspendida en ella?

ra la imagen:
es para busca

Análisis cuantitativo

- Calcule, para cada medida, una columna con la velocidad del peso suspendido, en cm/s.
- Use la función: `Tiempo de derivada("Distancia","Tiempo")`
- Para cada medida, haga una gráfica de velocidad contra tiempo y calcule la aceleración correspondiente. Anote sus resultados en los parámetros abajo de cada gráfica. Comente sus resultados

Discusión:

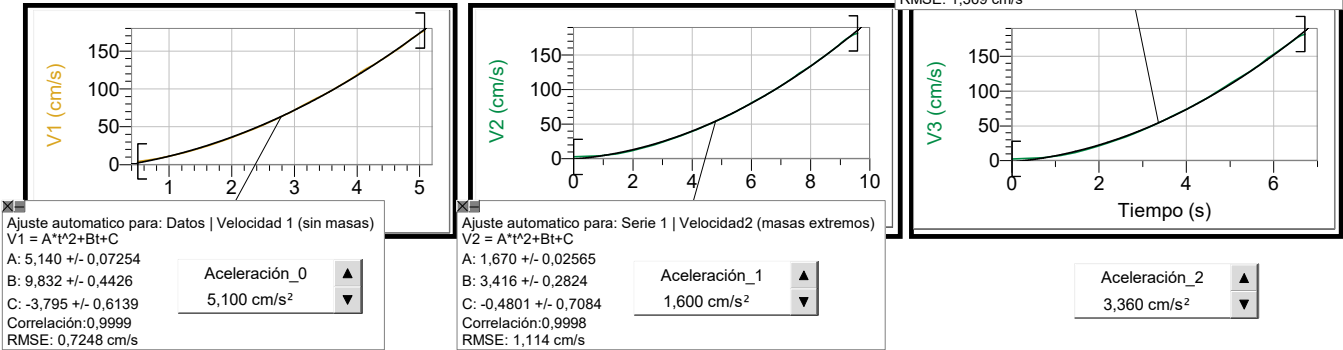

Análisis cuantitativo

- Use esta aceleración para medir el momento de inercia del rodillo en kg m^{-2} . Use la ecuación para calcular el momento de inercia de la guía.

- Para la segunda y tercera medidas, use la ecuación (11.8) y calcule las masas cilíndricas usando la aceleración obtenida cuando el móvil giratorio no tiene estas masas y la aceleración calculada cuando sí las tiene. Anote los resultados en los parámetros [Masa_cilíndrica_Set2](#) y [Masa_cilíndrica_Set3](#)

- ¿La masa calculada es consistente con la masa medida? Si no es así, proporcione las posibles razones de tales discrepancias. Indique además, cómo mitigaría esta causa sin modificar el montaje.
 La masa no es consistente ya que hay fuerzas de discrepancia que afectan el sistema y alteran la toma de datos por lo que produce un error porcentual al calculara la masa

	Momentos de Inercia			Serie 3	Serie 2	
	Inercia 0 (Kg cm ²)	Inercia 1 (Kg cm ²)	Inercia 2 (Kg cm ²)	Masa 1 (g)	Masa 2 (g)	
1	31,812	48,372	101,765	120,519	124,768	
2						
3						
4						
5						
6						

Masa_cilíndrica_Set2
 120,781 gr

Masa_cilíndrica
 120,0 gr

Masa_cilíndrica_Set3
 124,548 gr

Discusión:La masa no es consistente ya que hay fuerzas de discrepancia que afectan el sistema y alteran la toma de datos por lo que produce un error porcentual al calculara la masa

ra la imagen:
 s para busca

Conclusiones

ra la imagen:
is para busca

Se calcula el momento de inercia de un objeto que rota comprobando la teoria sobre momento de inercia

Se calcula la masa mediante formulas de la dinamica rotacional en el momento de inercia.