


Colisiones



El propósito de esta práctica es estudiar el teorema del impulso-momento y la conservación del momento lineal mediante colisiones de diferentes objetos.

a la imagen:
s para buscar

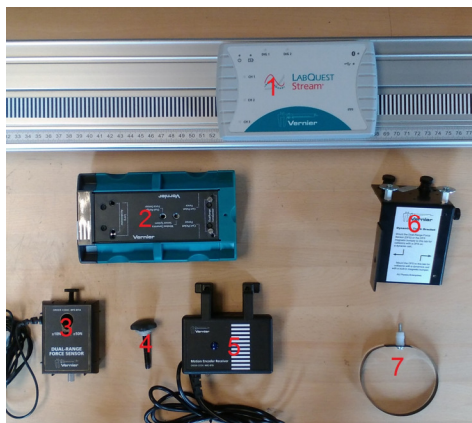

Materiales parte 1

1. Interfaz.
2. Carro verde.
3. Sensor de fuerza.
4. Tornillo.
5. Sensor motion encoder.
6. Soporte universal.
7. Resorte circular.

DURANTE TODA LA PRÁCTICA
TODOS LOS SENSORES
DEBEN PERMANECER
CONECTADOS A LA INTERFAZ

a la imagen:
s para buscar

Toma de Datos 1


Teorema impulso-momento

Mida la masa del carro y regístrela en el parámetro [Masa_Carro](#).

Programe la toma de datos en modo basado en tiempo.
Tiempo máximo de 3 segundos con 400 muestras por segundo.

No olvide inicializar los sensores a cero.

Masa_Carro
571,5 gr

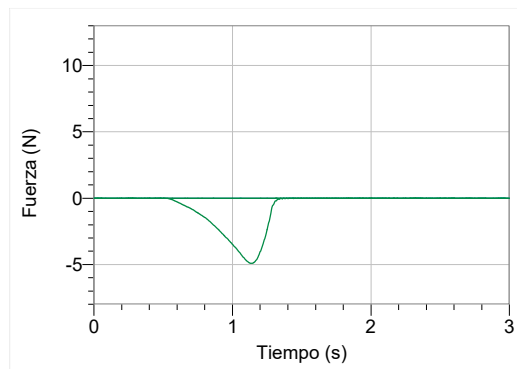

a la imagen:
s para buscar

Materiales partes 2 y 3

DURANTE TODA LA PRÁCTICA
TODOS LOS SENSORES
DEBEN PERMANECER
CONECTADOS A LA INTERFAZ



1. Interfaz.
2. Carros.
3. Sensor motion detector.
4. Brazo extensible.
5. Sensor motion encoder.
6. Panel reflector.

a la imagen
s para buscar

Toma de Datos 2

Colisión elástica

Realice los ajustes necesarios en el montaje descritos en la guía: quite el soporte universal con el sensor de fuerza. Coloque los 6 topes magnéticos a los carros.

Mida las masas de los carros.

Ambos móviles, se deben mover uno hacia el otro.



Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición. Verifique que ambos estén midiendo correctamente. Ajuste el *motion detector* de ser necesario.

Mida las posiciones de ambos carros y regístrelas en los parámetros [Masa_Carro_Verde](#) y [Masa_Carro_Gris](#).

DURANTE TODA LA PRÁCTICA
TODOS LOS SENSORES
DEBEN PERMANECER
CONECTADOS A LA INTERFAZ

Masa_Carro_Verde 571,5 gr

Masa_Carro_Gris 548,1 gr

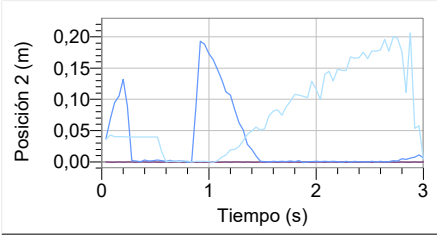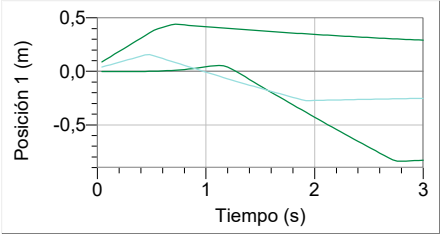

a la imagen
s para buscar


Toma de Datos 3

Colisión inelástica

El carro gris se deja en reposo.

No altere las masas de los carros.

Antes de tomar datos, inicie a cero los sensores de posición.

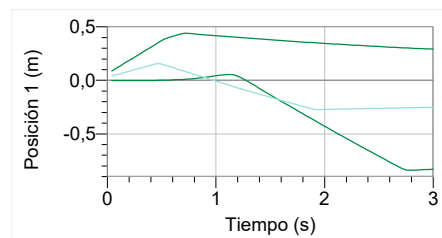

a la imagen:
s para buscar

DURANTE TODA LA PRÁCTICA
TODOS LOS SENSORES
DEBEN PERMANECER
CONECTADOS A LA INTERFAZ

Análisis cualitativo

la imagen
para buscar

- Resalte las características principales de la fuerza de impacto en la medida relacionada con el teorema del impulso-momento. ¿Es esta fuerza de corta duración (determine cuánto tiempo dura)?

- Suponiendo que en el impacto no se disipa energía alguna, ¿qué le pasa al carro en términos de la velocidad?

- ¿Qué se conserva en la colisión elástica? ¿Qué tan elástica o inelástica es esta colisión? (Puede contestarla después del análisis cuantitativo)

- En el caso de no tener conservación de la energía, explique a dónde iría el resto de la energía que había antes de las colisiones.

- Aplique lo aprendido y relate qué pasaría si fuesen vehículos reales y no los que usó en este experimento.

Análisis cuantitativo 1

Teorema impulso-momento

Haga una gráfica de fuerza contra tiempo. Luego, calcule el impulso como el área bajo la curva en la región en donde la fuerza sea diferente de cero.


¿Qué indica el signo de ésta área?
 El signo es negativo debido a que la velocidad final es menor a la inicial. Además, también influye que el resorte del sensor de fuerza está siendo comprimido, por lo que detecta la fuerza negativa

Impulso

-0,0024 kg m/s

▲

▼

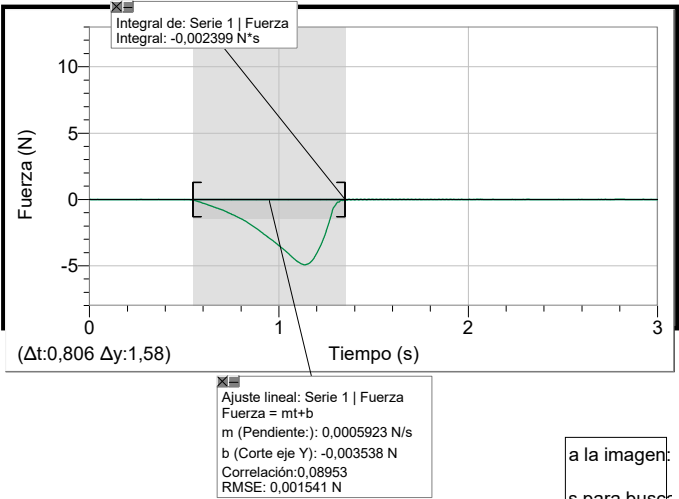

Análisis cuantitativo 1

Teorema impulso-momento


En una gráfica de posición contra tiempo, identifique el antes y el después del impacto contra el soporte universal. Mida la velocidad del móvil antes y después de la colisión.

Inserte estos valores de velocidad en la tabla de abajo, el software calculará el cambio en momento lineal automáticamente de acuerdo a la expresión dada en la guía.

Compare el valor obtenido para el cambio de momento lineal con el impulso.

Parte 1				
	V _i (m/s)	V _f (m/s)	Δp (kg m/s)	Impulso (kg m/s)
1	0,282	-0,3025	-0,334	-0,002
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ajuste lineal: Serie 1 | Posición 1
 x = mt+b
 m (Pendiente.): 0,2820 m/s
 b (Corte eje Y): 0,02876 m
 Correlación:0,9999
 RMSE: 0,0004703 m

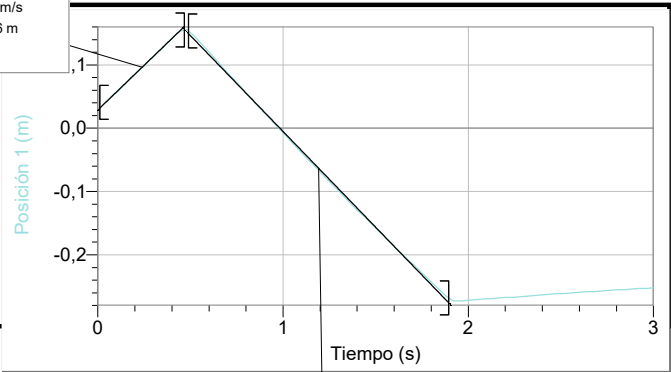

Ajuste lineal: Serie 1 | Posición 1
 x = mt+b
 m (Pendiente.): -0,3025 m/s
 b (Corte eje Y): 0,2976 m
 Correlación:-0,9997
 RMSE: 0,003104 m

a la imagen
 s para buscar

Análisis cuantitativo 2

Colisión elástica.

Haga una gráfica de posición contra tiempo de ambos móviles y mida las velocidades de cada móvil antes y después de la colisión.

Tenga en cuenta el signo de las velocidades (según su marco de referencia) cuando las coloque en los parámetros de abajo.

Velocidad_inicial_carro_verde
 0,6180 m/s

Velocidad_inicial_carro_gris
 0,0004 m/s



Velocidad_final_carro_verde
 -0,0572 m/s

Velocidad_final_carro_gris
 0,1286 m/s

Ajuste lineal: Serie 2 | Posición 1
 $x = mt + b$
 m (Pendiente): 0,6180 m/s
 b (Corte eje Y): 0,06269 m
 Correlación: 1,000
 RMSE: 0,0003747 m

Ajuste lineal: Serie 2 | Posición 2
 $x = mt + b$
 m (Pendiente): 0,0004288 m/s
 b (Corte eje Y): 0,0003601 m
 Correlación: 0,02968
 RMSE: 0,0009131 m

a la imagen:
 s para buscar

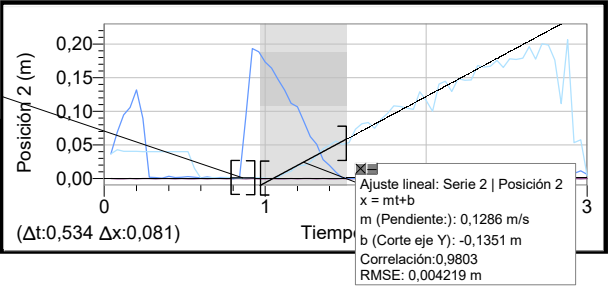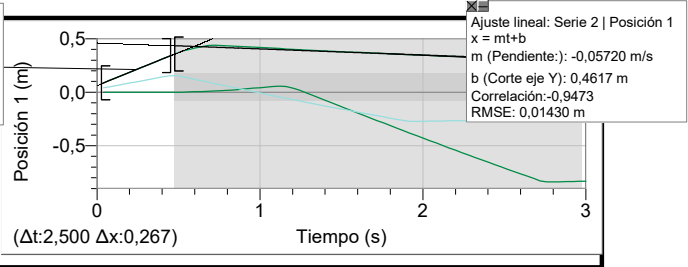

Análisis cuantitativo 2

Colisión elástica

- El software calculará el momento inicial y final de acuerdo a las ecuaciones de la guía.

Verifique que estos cálculos son correctos haciendo doble clic sobre el título de cada columna.

- Insertando columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial y final. Haga lo mismo para la energía cinética inicial y final. Discuta sus resultados ¿Se conserva el momento lineal? ¿Se verifica que la colisión es elástica?

	Parte 2					
	Momento inicial (g m/s)	Momento final (g m/s)	Energía inicial (J)	Energía final (J)	DPM	DPE
1	353,422	37,796	0,109	0,005	3779,586	0,547
2						

A partir de los datos, se ve que el momento lineal no se conserva, lo cual es incoherente con respecto a la teoría. En conclusión, no se presentó colisión elástica.

a la imagen
s para buscar

Análisis cuantitativo 3

Colisión inelástica.


- Haga una gráfica de posición contra tiempo para el móvil verde y mida las velocidades de éste antes y después de la colisión. ¿Cuál sería la velocidad inicial y final del carro gris?

- El software calcula el momento lineal antes y después de la colisión. Verifique cómo lo hace haciendo doble clic sobre el nombre de la columna correspondiente.

- El software calcula la energía cinética total antes y después de la colisión.

-Insertando columnas calculadas, calcule la diferencia porcentual entre el momento inicial y final. Haga lo mismo para la energía cinética inicial y final. Discuta sus resultados ¿Se conserva el momento lineal? ¿Se verifica que la colisión es elástica?

Ajuste lineal: Ultimo | Posición 1
 $x = mt + b$
 m (Pendiente): 0,005000 m/s
 b (Corte eje Y): -0,002000 m
 Correlación:0,6614
 RMSE: 0,001052 m

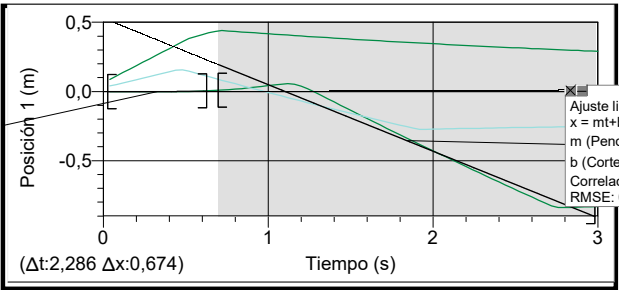

Ajuste lineal: Ultimo | Posición 1
 $x = mt + b$
 m (Pendiente): -0,4811 m/s
 b (Corte eje Y): 0,5303 m
 Correlación:-0,9841
 RMSE: 0,05825 m

Discusión:

Parte 3						
	Velocidad inicial (m/s)	Velocidad final (m/s)	Momento inicial (kg m/s)	Momento final (kg m/s)	Energía inicial (J)	Energía final (J)
1	0,005	-0,4811	0,0029	-0,5386	0,0000	0,1296

Conclusiones

la image
para sus